

## Garantia Limitada

La información de garantía siguiente es un SUMARIO de la Garantía del Producto completa provisto de GF Health Products, Inc. Para la garantía completa, por favor de visitar a la página de web [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

GF Health Products, Inc. (“GF”) garantía al comprador original o arrendatario (cual quiera is el “Cliente”) solamente, que va reemplazar o reparar componentes, a la decisión solo de GF, cuales son defectos en material o calidad utilizado normalmente y con servicio. La garantía es para partes solamente y no incluye fuerza laboral o el costo de transporte. Todas garantías con condicionales por el uso apropiado del producto estrictamente en acuerdo con las instrucciones aplicables de GF. Producto pródigo a usuarios como réntales deben ser serviciados por el proveedor y inspeccionado antes de entrega. Cada usuario debe ser preparado en la operación y seguridad de este producto antes de uso. Dentro las reglas normales en este documento, la estructura tiene garantía por cinco (5) anos y los componentes de uso normal como puntas, ruedas y manijas tienen garantía por tres (3) meses. El periodo de garantía se comencia en la fecha de transporte al Cliente a menos que haya una fecha de expiración en el componente en cual la garantía se expira en la periodo de garantía o la fecha de expiración.

### OBTENIENDO SERVICIO DE GARANTIA

La garantía limitada solamente aplica a defectos reportados al Distribuidor de quien el Cliente compro el producto dentro el periodo de garantía aplicable. Si no hay Distribuidor, debes llamar a GF directamente llamando (678) 291-3207, mandando fax a (770)-368-2386 o por email a [cs@grahamfield.com](mailto:cs@grahamfield.com). Direcciones específicos se van a dar por el Representante de Servicio De Clientes.

### EXCLUSIONES

La garantía no cubre y GF será responsable por lo siguiente: 1) Defectos, daño o otras condiciones causadas por mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidente, daño de transporte o falta de buscar y obtener reparo o repuesto en manera puntual; 2) Productos no instalados, utilizados or mantenidos correctamente; y 3) Cargos de Labor o transporte. Otras exclusiones se aplican.

**GARANTIA ENTERO. REMEDIO EXCLUSIVO Y DESCARGO DE DANOS CONSIGUIENTE**  
ESTA GARANTIA ES LA UNICA GARANTIA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTIAS, EXPRESIDAS O IMPLICITADAS.

Para la garantía completa por este producto, por favor de visitar a la página [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

# LUMEX®

### Features

- Arms drop independently below seat level for lateral transfers
- Easy-to-release drop arm mechanism may be operated by patients lacking manual dexterity
- Arms automatically lock in raised position
- Removable back bar facilitates use as a bedside commode, raised toilet seat or toilet safety frame
- Welded steel construction increases strength and stability
- Cushioned armrests enhance user comfort
- Easy to attach plastic seat [6433A, 6433A-2]
- Easy to attach padded seat [6437A]
- Comes complete with commode pail, cover and splash shield
- 300 lb Weight Capacity EVENLY DISTRIBUTED
- Designed to meet the requirements of HCPCS code: E0165

### Características

- Apoyabrazos se bajan independiente abajo del nivel del asiento para transferir lateral con seguridad
- Fácil de soltar mecanismo puede ser operado por pacientes quienes tienen destreza limitada
- Apoyabrazos se asegura automáticamente en la posición subida
- Respaldo desmontable facilita uso como inodoro al lado de cama, asiento elevado o marco de inodoro para seguridad.
- Construcción de acero aumenta esfuerza y estabilidad
- Apoyabrazos acolchonados aumentan comodidad de usuario
- Facil to sujetar asiento plastico [6433A, 6433A-2]
- Facil to sujetar asiento acolchonado [6437A]
- Viene completa con el balde de inodoro, tapa y salpicadera
- Capacidad de peso máximo de 300 lb. DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE
- Diseñado a reunir los requisitos de código de HCPCS: E0165

For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, please visit our website at [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

Para la información más ultimo sobre embalaje, garantías, productos y especificaciones, por favor de visitar a nuestro sitio de internet a [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

© 2014, GF Health Products, Inc.  
2935 Northeast Parkway, Atlanta, Georgia 30360  
Made in China    [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

GF0500036RevD14

# LUMEX®

## Silver Collection Steel Drop Arm Commode

*Colecion Plateado Inodoro de Acero Baja Apoyabrazo*

Items 6433A, 6433A-2 & 6437A



### User Instructions and Warranty Information

Important: Read Before Use

**Instrucciones e Informacion de la Garantia**

Importante: Lea Antes de Uso



## Instructions for Use – Please Read All Instructions Before Use.

### Setup

- Remove frame, seat, lid, pail, cover, and splash shield from carton.
- Attach seat and then lid to rear support of frame. Place splash shield or pail and cover in frame.  
**NOTE:** When installing the seat onto the frame, make sure that the seat is evenly spaced between the side frames to ensure proper stability.  
**NOTE:** Push down firmly until the seat snaps into place.  
**NOTE:** DO NOT use excessive force when installing the seat and lid.

### Adjusting Leg Height

- Depress the height adjustment button and slide the lower leg upward or downward until the height adjustment button is fully engaged in the desired hole.  
**NOTE:** An audible “click” will be heard.
- Repeat for other 3 legs.  
**CAUTION:** Ensure that all four commode legs are adjusted to the same height, and that all height adjustment buttons protrude fully through adjustment holes before use.

### Inserting Back Bar

- Remove back bar from carton.
- Insert back bar into channel guides on back of commode until back bar push buttons protrude fully through channel guide holes ( you will hear an audible click).

### Use Commode over Toilet


- Set commode to desired height (described in previous steps)
- Remove commode pail and lid
- Position splash shield in place onto pail supports
- Remove back bar (described in previous steps)
- Lift toilet bowl seat
- Place commode over toilet with slash shield positioned over the center of the toilet bowl. Commode is now ready for use. Clean seat and splash guard with disinfectant after each use.

### Use as Bedside Commode

- Set commode to desired height (described in previous steps).
- Lift commode seat and lid and place commode pail onto pail supports. Ensure that pail is properly positioned below commode opening.
- Place commode seat down. Commode is now ready for use.
- When use is finished using commode, place commode pail lid over commode pail to contain odors.
- Remove pail and lid simultaneously to empty pail. Clean seat and pail with disinfectant after each use.

### Arm Adjustment

- Drop Armrest:** to drop the armrest, push the release lever inwards to release the armrest. This releases the armrest allowing for the transfer on and off the commode.
- Raise Armrest:** to raise the armrest, lift the armrest to the upright position, ensuring that the push button protrudes fully from locking hole.

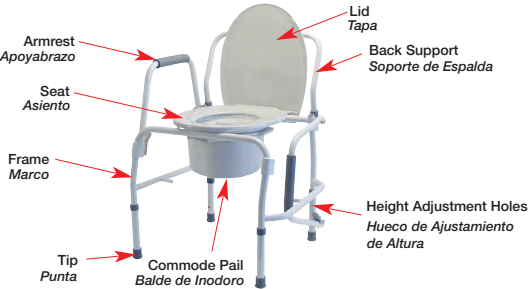

## Maintenance

- Use a mild soap and water solution, rinse with clear water, then dry with a soft cloth. Ensure that product is well rinsed before using.
- Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the product.
- Check fit and tightness of all nuts, bolts and knobs weekly to ensure that product is safe to use.
- To guarantee the best service from your product, always specify Lumex replacement parts, available from your GF Health Products, Inc authorized distributor.

For more information regarding GF Health Products, Inc. products, parts and services, please contact your distributor or visit us online at [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).

## Safety Guidelines – Please Read Before Use

NOTE: Check ALL parts for shipping damage. If shipping damage is noted, DO NOT use. Contact carrier/dealer for further instruction.

## WARNING

**WARNING:** DO NOT use this product without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner's manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.

**WARNING:** Users with limited physical capabilities should be supervised or assisted when using the commode.

**WARNING:** Item has a maximum weight capacity of 300 lb. EVENLY DISTRIBUTED.

**WARNING:** GF Health Products Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly, or use of this product.

**WARNING:** Leg extensions with rubber tips MUST be in contact with the floor at all times.

**WARNING:** Ensure that the push buttons fully protrude through the same height adjustment hole of each leg extension. This ensures that the leg extensions are securely locked in position and that an even height adjustment is achieved.

**WARNING:** Make sure that all attaching hardware, screws, nuts and/or bolts are tight at all times.

**WARNING:** Inspect rubber tips on the leg extensions for rips, tears, cracks or wear or if they are missing. Replace them IMMEDIATELY if any of these conditions exist.

**WARNING:** The commode seat MUST be installed before sitting on the commode.

**WARNING:** Notice for California Customers  
**California Proposition 65 WARNING:** This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and reproductive or developmental harm.

**WARNING:** If components are damaged or missing, contact your GF Health Products Inc. distributor immediately.

## Limited Warranty

The following warranty information is a SUMMARY of the complete Product Warranty provided by GF Health Products, Inc. For the complete warranty, please visit our website at [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).

GF Health Products, Inc. (“GF”) warrants to the original retail purchaser or lessee (either is the “Customer”) only, that it will replace or repair components, at GF’s sole discretion, that are defective in material or workmanship under normal use and service. The warranty is for parts only and does not include labor or costs of shipping. All warranties are conditioned upon the proper use of the product strictly in accordance with applicable GF instructions. Product provided to users as rentals must be serviced by the provider and inspected prior to delivery. Each user must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use. Within the guidelines set forth in this document, the frame is warranted for five (5) years and the normal wear components such as tips, wheels/casters, and handgrips are warranted for three (3) months. The applicable warranty period shall commence from date of shipment to the Customer, unless there is an expiration date on the component in which case the warranty shall expire on the earlier of the warranty period or the expiration date.

### OBTAINING WARRANTY SERVICE

This limited warranty shall only apply to defects that are reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period. If there is not a Dealer, you must contact GF directly by calling (678) 291-3207, sending a fax request to 770-368-2386 or by e-mailing a request to [cs@grahamfield.com](mailto:cs@grahamfield.com). Specific directions will be provided by the Customer Service Representative.

### EXCLUSIONS

The warranty does not cover and GF shall not be liable for the following: 1) Defects, damage, or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; 2) Products not installed, used, or properly cleaned and maintained; and 3) Labor or shipping charges. Other exclusions apply.

### ENTIRE WARRANTY. EXCLUSIVE REMEDY AND CONSEQUENTIAL DAMAGES DISCLAIMER

THIS WARRANTY IS GF’S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED.

For the complete warranty for this product, please visit our website at [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).

## MANTENIMIENTO

- Utilice una solución de jabón suave y agua, enjuague con agua limpia y seca con una toalla suave. Asegure que el inodoro esta enjuagado bien antes de uso.
- Nunca utilice solventes orgánicos, limpiadores abrasivos en cual quiere parte de este inodoro.
- Cheque seminalmente que los tornillos y perillas están apretados para asegurar que el inodoro esta bueno para utilizar.
- Para garantizar el servicio mejor de su inodoro, siempre pide partes de reemplace de Lumex si son disponible por so distribuidor de GF Health Products, Inc.

Para mas información sobre su producto, partes o servicio de GF Health Products, Inc, por favor de llamar a su distribuidor o visitenos online en [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).

## Directriz de Seguridad – Por Favor De Leer Antes de Uso

NOTA: Examine to das las partes por daño en transporte. Si hay daño en transporte, NO UTILICE. Llame a su empresa de transporte para instrucciones.

## ADVERTENCIAS

**ADVERTENCIA:** NO DEBE UTILIZAR este producto sin primero leer y entender estas instrucciones y cual quiere otro material como el manual de usuario, manual de servicio hoja de instruccón suministrado con este producto. Si no puedes entender las advertencias, cauciones o instrucciones, llame a su profesional de cuidio de salud, distribuidor o personal técnica antes de tratar de usar este equipo – o si no, herida o daño puede ocurrir.

**ADVERTENCIA:** Usuarios con capacidades fisicos puede ser supervisados o asistidos cuando utilizar el inodoro.

**ADVERTENCIA:** Capacidad de peso máximo de 300 lb. DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE.

**ADVERTENCIA:** GF Health Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso impropio de este producto.

**ADVERTENCIA:** Extensiones de patas con puntas de goma TIENEN que estar en contacto con el piso todo el tiempo.

**ADVERTENCIA:** Asegure que los botones de apretar sobresalen completamente por los mismos huecos de ajustamiento de altura de cada extensión de pata. Esto asegura que las extensiones de pata están asegurados en posición y que el ajustamiento de altura esta uniforme.

**ADVERTENCIA:** Asegure que la ferreteria, tornillos y perillos están apretados todo el tiempo.

**ADVERTENCIA:** Examine las puntas de goma en las extensiones de patas para grietas o desgasto o si faltan. Reemplace IMMEDIAMENTE si estas condiciones existen.

**ADVERTENCIA:** El asiento del inodoro TIENEN que estar instalado antes de sentarse en el inodoro.

**ADVERTENCIA:** Aviso a Clientes de California  
**ADVERTENCIA Proposition 65 de California:** Este producto contiene una cemica que el Estado de California de causar cancer y herida reproductiva y de desarrollo.

**ADVERTENCIA:** Si los componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor de GF Health Products, Inc. inmediatamente.