

LUMEX®

by graham-field

Everyday Single-Release Folding Walker

Andador Plegable de Ambas Mecanismos

Item 613070A



graham
field

QTY. 1 EA

SAFETY GUIDELINES - PLEASE READ BEFORE USE

1. Each individual should **ALWAYS** consult with their physician or other health care professional to determine proper adjustment and usage.
2. Before use, be sure that the walker is in its open and locked position.
3. All legs **MUST** be in contact with the floor at all times during use. This will ensure the walker is properly balanced.
4. This product has a maximum user weight limitation of 300 lbs - **EVENLY DISTRIBUTED. ALWAYS** observe the user weight limitation on the hangtag.
5. Ensure handgrips **DO NOT** twist on walker – otherwise damage or injury may occur.
6. **ALWAYS** test to see that the walker and attachments are properly and securely locked in the open position **BEFORE** using.
7. After installation and before use, ensure that all attaching hardware is securely tightened.
8. **ALWAYS** use caution when using the walker on wet and slippery surfaces. **DO NOT** use the walker on stairs and steep inclines.
9. Before attempting to reach objects or pick them up from the floor by reaching down between your knees, place feet securely on the floor. Use **EXTREME** caution when reaching for any object.
10. GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.
11. Inspect Walker weekly for proper function and wear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your Lumex dealer for repair and/or appropriate replacement parts.

GENERAL WARNING

- **DO NOT** use this product without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner's manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- If components are damaged or missing, contact your GF Health Products, Inc. distributor immediately. **DO NOT** substitute parts.

GENERAL WARNING (CONT.)

- Before use, ensure that all assembled parts are secure and all hardware is tightened.
- Care should be taken to ensure that all height adjustments are secure, and that wheels (if applicable) and moving objects are in good working order before using this walker.
- **ALWAYS** observe the user weight limitation on the hangtag of this product.

 **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm-
www.p65warnings.ca.gov.

INSTALLATION WARNINGS

- GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.
- Inspect product weekly or on a set routine preventative maintenance schedule for normal wear and tear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your Lumex dealer for repair and/or appropriate replacement parts.
- **ALWAYS** test to see that the product is properly secured in open position **BEFORE** use and ensure all hardware is securely tightened.

STABILITY WARNINGS

Be careful when reaching for objects when using the walker. Reaching for objects can change the weight distribution of the walker and may cause the walker to tip, resulting in injury or damage.

MAINTENANCE

- For dust and dirt, wipe walker gently with damp, soft cloth.
- Inspect wheels (if applicable) periodically for wear or damage. Use a mild soap and water solution to clean, rinse with clear water, then dry with a soft cloth.
- Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the walker.
- Inspect Walker weekly for proper function and wear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your GF Health Products, Inc. distributor for repair and/or appropriate replacement parts.
- If handgrips are loose, **DO NOT** use. Contact your GF Health Products, Inc. authorized distributor.
- Replace any broken, damaged or worn items immediately.
- To guarantee the best service from your product, always specify Lumex replacement parts, available from your GF Health Products, Inc. authorized distributor.

For more information regarding GF Health Products, Inc. products, parts and services, please contact your distributor or visit us online at www.grahamfield.com.

ASSEMBLY OF THE WALKER

1. Remove closed walker from carton.
2. Install legs by depressing the height adjustment button and slide onto walker frame until the button engages in the desired adjustment hole. Adjust all leg attachments to the same height.
WARNING: Ensure all push buttons protrude fully from height-adjustment holes, all legs are adjusted to the same height, and wheeled leg attachments are positioned on the front and towards the outside of the walker.
3. To open walker, push handgrips and sides out away from each other until the release mechanisms lock into place.

CLOSING THE WALKER


1. Push downward on release button and hold.
2. Grab one handgrip and push inwards towards center of walker.

ADJUSTING THE HEIGHT

NOTE: Height adjustment should be made to desired height before operation. Consult with healthcare professional for proper adjustment.

1. To adjust the height of the leg attachment, depress the adjustment button and slide upwards or downwards to the desired height.
2. Adjust the height of the walker by aligning all four leg attachments to the same position height.

When walking, the user should grasp one handgrip in each hand, positioning body between the two rear walker legs, and walking at a comfortable pace. The rear walker legs should be in contact with the floor at all times.

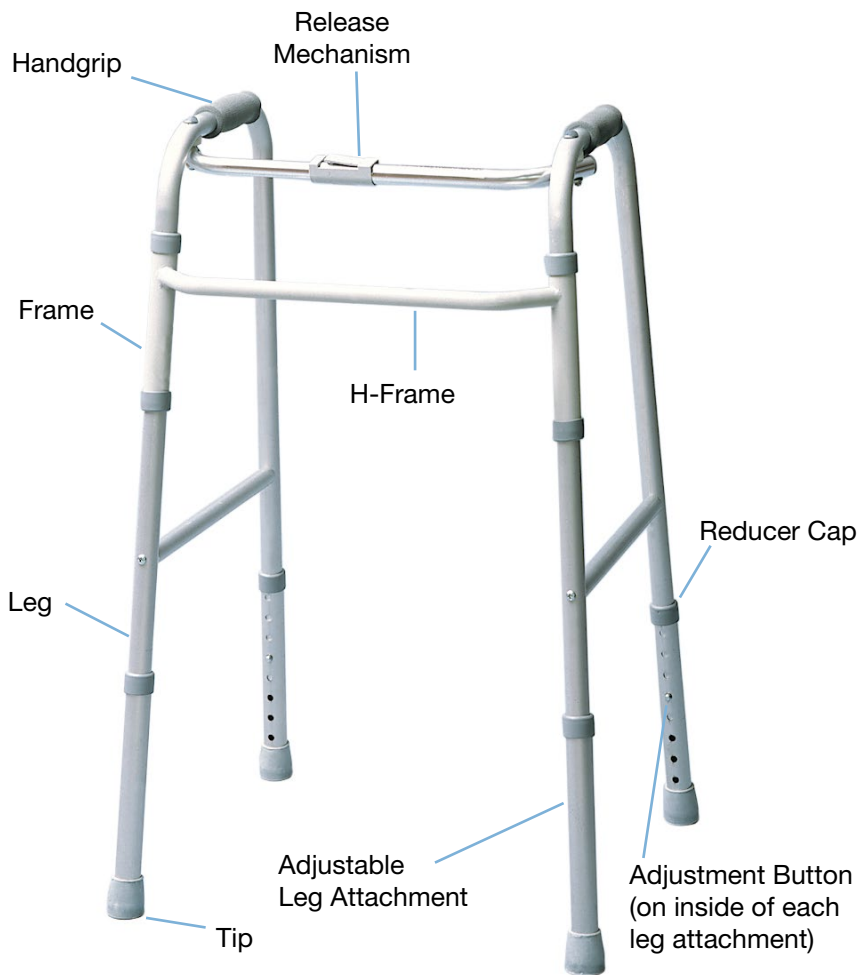

LIMITED WARRANTY

GF Health Products, Inc. ("GF") warrants this product to be free from defects in materials and workmanship to the original retail purchaser or original lessee only ("Customer") for:

Frame: one (1) year

Tips, Wheels/Casters, and Handgrips: three (3) months

The warranty does not cover: 1) other non-durable components; 2) defects, damage or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; and 3) products not installed, used, or properly cleaned and maintained in accordance with the applicable GF instructions. Product provided to a lessee must be inspected prior to delivery and must be maintained by the Dealer. The lessee must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use.

GF will, at its option, repair or replace the defective product. Warranty issues must: 1) be reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period and 2) upon examination by GF or its authorized representative, prove to be a warranty item. GF is not responsible for freight or labor charges associated with the warranted item. If there is no Dealer, you must contact GF directly by calling 770-368-4700, faxing 770-368-4932 or e-mailing cs@grahamfield.com. Specific directions will be provided.

TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY IS GF'S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. EXCEPT IN CASES WHERE IMPLIED WARRANTIES MAY NOT BE VALIDLY WAIVED, GF MAKES NO IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. GF'S TOTAL LIABILITY FOR THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE COST OF THE PRODUCT(S) GIVING RISE TO THE CLAIM. IN NO EVENT WILL GF BE LIABLE FOR ANY DIRECT, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. CERTAIN LAWS MAY CONFER ADDITIONAL RIGHTS REGARDING WARRANTIES FOR SPECIFIC PRODUCTS AND IN THOSE INSTANCES GF'S LIABILITY AND THE LIABILITY OF GF'S SUPPLIERS, SHALL BE LIMITED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights, which vary from state to state or country to country.

For additional information related to warranty claims, please visit GF's terms and conditions located on www.grahamfield.com

GARANTIA LIMITADA

GF Health Products, Inc. ("GF") garantiza este producto de ser libre de defectos en material o calidad utilizado al comprador original o arrendatario (cualquiera sea el "Cliente") solamente por:

Marco: uno (1) años

Ruedas, empuñaduras, frenos de mano, almohadillas de antebrazo, y asiento: tres (3) meses

La garantía no cubre: 1) otros componentes no durables; 2) defectos, daños u otras condiciones causadas, en su totalidad o en parte, por el mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidentes, daños durante el transporte, manipulación indebida o dejar de solicitar y obtener la reparación o el reemplazo de una manera oportuna; 3) productos que no se instalen, utilicen, limpien y mantengan de manera apropiada, como se requiere en el manual de GF. Productos provistos a un arrendatario deben ser inspeccionados antes de entrega y deben ser mantenidos por el Distribuidor. El arrendatario o Cliente debe ser entrenado propiamente en la operación y seguridad de este producto antes de uso.

GF va a decidir, a su opción, reparar o reemplazar un producto defectivo. Cuestiones de garantía deben: 1) ser reportados al Distribuidor de donde el consumidor compró el producto dentro del período de garantía aplicable y 2) en examinación por GF o su representante autorizado, dar prueba del producto de garantía. GF no es responsable por flete o cargos de labor asociados con el producto bajo la garantía. Si no hay un Distribuidor, puede contactar a GF directamente llamando 770-368-4700, por fax 770-368-4932 o por email cs@grahamfield.com. Direcciones específicas serán suministradas.

A LA MEDIDA MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESADAS O IMPLÍCITAS. GF NO HACE GARANTÍAS ENTENDIDAS DE CUALQUIERA MANERA INCLUYENDO GARANTÍAS ENTENDIDAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PREPÓSITO PARTICULAR. SI UN MODELO Y MUESTRA SE LE ENSEÑA A UN CLIENTE, TAL MODELO O MUESTRA FUE UTILIZADO SOLAMENTE PARA ILUSTRAR EL TIPO GENERAL Y CALIDAD DEL PRODUCTO Y NO PARA REPRESENTAR QUE EL PRODUCTO SE CONFORME CON ESE MODELO Y MUESTRA EN TODOS RESPETOS. TODA RESPONSABILIDAD DE GF POR CUALQUIER PRODUCTO ES LIMITADA AL COSTO DEL PRODUCTO EN LA RECLAMACIÓN. EN NO EVENTO EN CONTRATO, INDEMNIZACIÓN, GARANTÍA, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O OTRO QUE GF SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL, EJEMPLAR O CONSIGUIENTES. ALGUNAS LEYES PUEDEN CONFERIR DERECHOS ADICIONALES SOBRE GARANTÍAS Y EN ESOS INSTANTES LA RESPONSABILIDAD DE GF Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES DE GF SERÁN LIMITADAS A LA MEDIDA MÁXIMO PERMITIDA POR LA LEY. Esta garantía le provee derechos legales específicamente. Usted podrá tener otros derechos, que se varían por estado a estado o país o país.

Por información adicional sobre reclamaciones de garantía, por favor de visitar los términos y condiciones de GF que se encuentran en la página www.grahamfield.com

DIRECTRIZ DE SEGURIDAD – POR FAVOR DE LEER ANTES DE USO

1. Cada individual SIEMPRE debe consultar con su doctor o otro profesional de cuidado de salud para determinar ajustamiento y uso apropiado.
2. Antes de uso, asegure que el andador esta en su posición abierto y asegurado.
3. Todas las patas TIENEN que estar en contacto con el piso todo el tiempo cuando en uso. Esto puede asegurar que el andador esta balanceado apropiadamente.
4. Este producto tiene una limitación de peso máximo de usuario de 300 lb- DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE. SIEMPRE tiene que observar la limitación de peso en el “hang tag”.
5. Asegure que los mangos NO SE dan vuelta en el andador – o si no, daño o herida puede ocurrir.
6. SIEMPRE prueba que el andador y accesorios están puestos seguramente en la posición abiertos ANTES de uso.
7. Después de instalación y antes de uso, asegura que el ferretero esta seguramente apretados.
8. SIEMPRE use caución cuando usando el andador en superficies mojados y resbalosos. NO USE el andador en escaleras o inclinadas.
9. Antes de intentar alcanzar objetos o recogerlos del piso alcanzando dentro sus rodillas, asegura sus pies en el piso. Usa caución EXTREMO cuando alcanzando por cualquier objeto.
10. GF Health Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso incorrecto de este producto.
11. Examine su andador semanal para función normal y desgaste. Si algunos componentes no están funcionando y se ve con desgaste, llame a su distribuidor de Lumex para reparación o reemplazo de partes.

ADVERTENCIAS

- **NO DEBE** usar este producto sin leer y entender completamente estas instrucciones y material adicional que viene con este producto. Si no puedes entender los advertencias, cauciones o instrucciones, llame a su profesional, distribuidor o personal técnico antes de tratar de usar este equipo – o si no, herida o daño puede ocurrir.
- Si los componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor inmediatamente. NO substituya partes.

- Antes de uso, asegure que las partes instalados están seguros y todo el ferretería esta apretado.
- Cuido debe estar hecho para asegurar que todos los ajustamientos de altura están seguros, y que las ruedas (si aplicable) y objetos que se mueven están en buenas condiciones antes de usar el andador.
- SIEMPRE observa la limitación de peso del usuario en el "hangtag" de este producto.
- Tenga cuidado cuando alcanzando por objetos cuando usando el andador. Alcanzando por objetos puede cambiar la distribucion de peso en el andador y puede causar que el andador se dobla, resultando en herida o daño.

 **ADVERTENCIA: CANCER Y DANO REPRODUCTIVO**
www.p65Warnings.ca.gov

ADVERTENCIAS DE INSTALACION

- GF Health Products Inc. no asume responsibilidad por dano o herida hecho por instalacion inapropiado, ensambla o uso de este producto.
- Examina el producto semanalmente o en ua rutina de mantenimiento preventativo para uso normal. Si algun componente no esta trabajando correctamente o se aparece usado, llame a su distribuidor de Lumex para reparacion y/o partes de reemplace apropiado.
- SIEMPRE trata de ver que el producto esta asegurado correctamente in la posicion abierto ANTES de uso y asegure que los tornios/hardware estan ajustados seguramente. El soporte de espalda debe SIEMPRE estar puesto y NO es diseno para soportar todo el peso del usuario.

ADVERTENCIAS DE ESTABILIDAD

Tenge cuidado cuando alcanzando por objetos mientras utilizando el andador. Alcanzando por objetos puede cambiar la distribucion de peso del andador y puede causar que se de vuelta el andador, resultando en herida o dano.



ENSAMBLAJE DEL ANDADOR

1. Remueva el Andador cerrado del cartón.
2. Instala las patas apretando el botón de ajustamiento de altura y desliza sobre el armazón del andador hasta que el botón se engancha en el hueco deseado. Ajusta todas las patas a la misma altura.
3. Repite para la otra manga.
4. Empuje las mangas y los lados afuera hasta que se asegura los mecanismos en posición.

ADVERTENCIA: Asegura que todos los botones sobresalen completamente por los huecos de ajustameinto, que todas las patas están ajustadas a la misma altura y que las patas con ruedas están posicionadas en la parte de frente y sobre la parte afuera del andador.

CERRANDO EL ANDADOR

1. Aprete hacia abajo en los botone de desconexión y aguanta.
2. Agarre la manga y empuja hacia el centro del andador.

AJUSTANDO LA ALTURA

NOTA: Debe ser ajustado a la altura deseado antes de operación.

Consulta con su profesional de cuido de salud para ajustamiento apropiado.

1. Para ajustar la altura de las patas, apreté el botón de ajustamiento y deslice hacia arriba y abajo a la altura deseado.
2. Ajusta la altura del andador en alineando todas cuatro patas a la misma posición de altura.

Cuando caminando, el usuario debe agarrar una manga con cada mano, posicionando el cuerpo dentro las patas a traseras, y caminando a un paso confortable. Las patas a traseras deben estar en contacto con el piso todo el tiempo.

MANTENIMIENTO

- Para polvo, limpie el andador con una toalla suave y mojada.
- Examine las ruedas (si aplicable) por daño y desgaste periódicamente. Utilice un jabón suave y agua para limpiar, lave con agua limpia y seca con una toalla suave.
- Nunca utilice solventes orgánicos, limpiadores abrasivos o estropajos en cual quiere parte del andador.
- Examine su andador seminal para función y desgaste. Si algunos componentes no están funcionando correctamente o se ven con desgaste, llame a su distribuidor de GF Health Products, Inc. para reparación y partes de reemplazo.
- Si los mangos están sueltos, **NO LOS** use. Llame a su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc.
- Para el mejor servicio de su andador, siempre use partes de reemplazo de GF Health Products, Inc.

Para mas información sobre su producto, partes o servicio de GF Health Products, Inc, por favor de llamar a su distribuidor o visítenos online en www.grahamfield.com.

Features

- Anodized aluminum frame supports a 300 lb weight capacity-
EVENLY DISTRIBUTED
- Single release folding mechanism is designed to aid users with limited hand dexterity
- Contoured, textured handgrips provide additional comfort
- Stable and lightweight frame makes it easy to maneuver

Características

- Marco de aluminio soporta una capacidad de peso de 300 lb-
DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE
- Mecanismo ambos de doblar permite que el marco se dobla fácilmente y es ideal para usuarios con deteiridad limitada
- Mangas contorneados y con textura provee comodidad adicional
- Marco estable y con peso bajo se hace mas fácil para mover

For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, please visit our website at www.grahamfield.com

Para la información más ultimo sobre embalaje, garantías, productos y especificaciones, por favor de visitar a nuestro sitio de internet a www.grahamfield.com

© 2014, GF Health Products, Inc.,
One Graham-Field Way, Atlanta, Georgia 30340.
Made in China. www.grahamfield.com