

Garantía Limitada

La información de garantía siguiente es un **SUMARIO** de la Garantía del Producto completa provisto de GF Health Products, Inc. Para la garantía completa, por favor de visitar a la página de web www.grahamfield.com

GF Health Products, Inc. (“GF”) garantía al comprador original o arrendatario (cual quiera is el “Cliente”) solamente, que va reemplazar o reparar componentes, a la decisión solo de GF, cuales son defectos en material o calidad utilizado normalmente y con servicio. La garantía es para partes solamente y no incluye fuerza laboral o el costo de transporte. Todas garantías con condicionales por el uso apropiado del producto estrictamente en acuerdo con las instrucciones aplicables de GF. Producto pródigo a usuarios como réntales deben ser serviciados por el proveedor y inspeccionado antes de entrega. Cada usuario debe ser preparado en la operación y seguridad de este producto antes de uso. Dentro las reglas normales en este documento, la estructura tiene garantía por cinco (5) anos y los componentes de uso normal como puntas, ruedas y manijas tienen garantía por tres (3) meses. El periodo de garantía se comencia en la fecha de transporte al Cliente a menos que haya una fecha de expiración en el componente en cual la garantía se expira en la período de garantía o la fecha de expiración.

OBTENIENDO SERVICIO DE GARANTIA

La garantía limitada solamente aplica a defectos reportados al Distribuidor de quien el Cliente compro el producto dentro el periodo de garantía aplicable. Si no hay Distribuidor, debes llamar a GF directamente llamando (678) 291-3207, mandando fax a (770)-368-2386 o por email a cs@grahamfield.com. Direcciones específicos se van a dar por el Representante de Servicio De Clientes.

EXCLUSIONES

La garantía no cubre y GF será responsable por lo siguiente: 1) Defectos, daño o otras condiciones causadas por mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidente, daño de transporte o falta de buscar y obtener reparo o repuesto en manera puntual; 2) Productos no instalados, utilizados or mantenidos correctamente; y 3) Cargos de Labor o transporte. Otras exclusiones se aplican.

GARANTIA ENTERO. REMEDIO EXCLUSIVO Y DESCARGO DE DANOS CONSIGUIENTE

ESTA GARANTIA ES LA UNICA GARANTIA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTIAS, EXPRESIDAS O IMPLICITADAS.

Para la garantía completa por este producto, por favor de visitar a la página www.grahamfield.com

LUMEX®

Features

- Ideal for users who do not require a walker but need a wider base for support and for those limited to one hand or arm use
- Lighter than a walker; more stable than a cane
- Contoured, comfortable handgrips
- Folds easily with one hand
- Maximum Weight Capacity 300 lb - **EVENLY DISTRIBUTED**
- Adjustable in height from 29" - 34"
- Lifetime Limited Warranty

Características

- Ideal para usuarios quienes no requieren un andador pero necesitan un base mas ancho para soporte y para los quienes son limitados a uso de un brazo o mano
- Mas ligero que un andador; mas estable que un bastón
- Mangas confortables y contorneados
- Se dobla fácilmente con una mano
- Capacidad de Peso Máximo 300 lb - **DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE**
- Ajustable en altura de 29" - 34"
- Garantía Limitada de por Vida

For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, please visit our website at www.grahamfield.com

Para la información más ultimo sobre embalaje, garantías, productos y especificaciones, por favor de visitar a nuestro sitio de internet a www.grahamfield.com

© 2014, GF Health Products, Inc.
2935 Northeast Parkway, Atlanta, Georgia 30360
Made in China www.grahamfield.com

GF0600010RevD14

LUMEX®

Walkane

Andador Bastón

Item 6015A



User Instructions and Warranty Information

Important: Read Before Use

Instrucciones e Informacion de la Garantia
Importante: Lea Antes de Uso



Instructions for Use – Please Read All Instructions Before Use. Intended Use

This product is designed for use by those who:

- Require a wider base of support than that offered by most canes.

Please consult a healthcare professional for the proper height adjustment.

Height Adjustment

1. To adjust the height of the leg attachment, depress the adjustment button and slide upwards or downwards to the desired height.
2. Adjust the height of the Walkane by aligning all four leg attachments to the same position height.
3. Position the Walkane so that the closed end of the cross brace is facing away from you.


NOTE: The Walkane is packaged in its lowest height position. It should be adjusted to the desired height before operation.

To Open Walkane

1. To unfold Walkane, press down on crossbrace until it reaches the crossbrace stop.

To Close Walkane

1. Pull up on crossbrace.

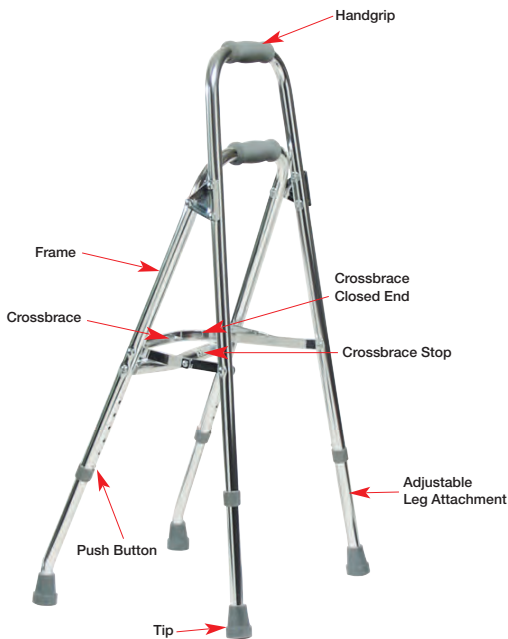

Maintenance

- For dust and dirt, wipe Walkane gently with damp, soft cloth.
- Inspect periodically for wear or damage. Use a mild soap and water solution to clean, rinse with clear water, then dry with a soft cloth.
- Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the walker.
- Inspect Walkane weekly for proper function and wear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your GF Health Products, Inc. distributor for repair and/or appropriate replacement parts.
- If handgrips are loose, DO NOT use. Contact your GF Health Products, Inc. authorized distributor.
- Replace any broken, damaged or worn items immediately.
- To guarantee the best service from your product, always specify Lumex replacement parts, available from your GF Health Products, Inc authorized distributor.

For more information regarding GF Health Products, Inc. products, parts and services, please contact your distributor or visit us online at www.grahamfield.com.

Safety Guidelines – Please Read Before Use

NOTE: Check ALL parts for shipping damage. If shipping damage is noted, DO NOT use. Contact carrier/dealer for further instruction.

1. Each individual should ALWAYS consult with their physician or other health care professional to determine proper adjustment and usage.
2. Before use, be sure that the Walkane is in its open and locked position.
3. All legs MUST be in contact with the floor at all times during use. This will ensure the Walkane is properly balanced.
4. This product has a maximum user weight limitation of 300 lbs. ALWAYS observe the user weight limitation on the hangtag.
5. Ensure handgrips DO NOT twist on Walkane – otherwise damage or injury may occur.
6. ALWAYS test to see that the Walkane and attachments are properly and securely locked in the open position BEFORE using.
7. After installation and before use, ensure that all attaching hardware is securely tightened.
8. ALWAYS use caution when using the Walkane on wet and slippery surfaces. DO NOT use the Walkane on stairs and steep inclines.
9. DO NOT store or transport Walkane in open position. Fold Walkane when not in use.
10. Before attempting to reach objects or pick them up from the floor by reaching down between your knees, place feet securely on the floor. Use EXTREME caution when reaching for any object.
11. GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.
12. Inspect Walkane weekly for proper function and wear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your Lumex dealer for repair and/or appropriate replacement parts.

WARNING

WARNING: DO NOT use this product without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner’s manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.

WARNING: If components are damaged or missing, contact your distributor immediately. DO NOT substitute parts.

WARNING: Before use, ensure that all assembled parts are secure and all hardware is tightened.

WARNING: Care should be taken to ensure that all height adjustments are secure, and that wheels (if applicable) and moving objects are in good working order before using this Walkane.

WARNING: ALWAYS observe the user weight limitation on the hangtag of this product.

WARNING: Notice for California Customers

California Proposition 65 WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and reproductive or developmental harm.

WARNING: Be careful when reaching for objects. Reaching for these objects will cause a change to the weight distribution of the Walkane and may cause it to tip, resulting in injury or damage.

Instrucciones Para Uso – Por Favor de Leer Todas las Instrucciones Antes de Uso.

Uso Entendido

Este producto es diseando para uso por los quienes:

- Requieren un base de soporte mas ancho de lo que ofrece por la mayoría de bastones.

Por favor de consultar con un profesional de cuidado de salud para ajustamiento apropiado.

Ajustando la Altura

1. Para ajustar la altura de las patas, apreté el botón de ajustamiento y deslice hacia arriba y abajo a la altura deseado.
2. Ajusta la altura del walkane en alineando todas cuatro patas a la misma posición de altura.
3. Posicione el Walkane para que la parte cerrada de la barra esta aparte de su mismo.


NOTA: El walkane esta empaquetado en su posición mas baja. Debe ser ajustado a la altura deseado antes de operación.

Abriendo el Walkane

1. Para desdoblar el Walkane, apreté hacia abajo en la barra hasta que se parre en la parada de la barra.

Cerrando el Walkane

1. Jale hacia arriba en la barra.

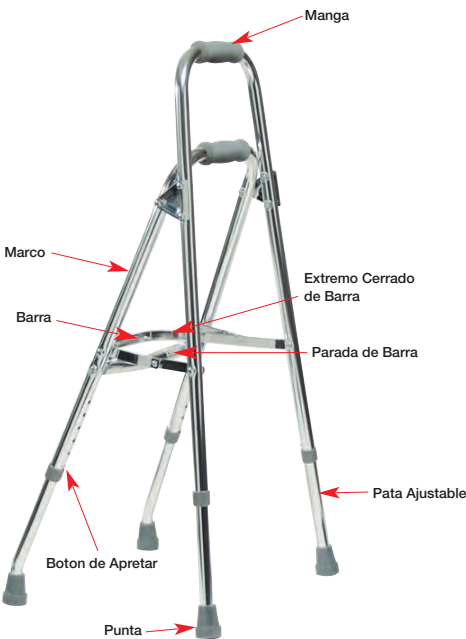

Limited Warranty

The following warranty information is a **SUMMARY** of the complete Product Warranty provided by GF Health Products, Inc. For the complete warranty, please visit our website at www.grahamfield.com.

GF Health Products, Inc. (“GF”) warrants to the original retail purchaser or lessee (either is the “Customer”) only, that it will replace or repair components, at GF’s sole discretion, that are defective in material or workmanship under normal use and service. The warranty is for parts only and does not include labor or costs of shipping. All warranties are conditioned upon the proper use of the product strictly in accordance with applicable GF instructions. Product provided to users as rentals must be serviced by the provider and inspected prior to delivery. Each user must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use. Within the guidelines set forth in this document, the frame is warranted for five (5) years and the normal wear components such as tips, wheels/casters, and handgrips are warranted for three (3) months. The applicable warranty period shall commence from date of shipment to the Customer, unless there is an expiration date on the component in which case the warranty shall expire on the earlier of the warranty period or the expiration date.

OBTAINING WARRANTY SERVICE

This limited warranty shall only apply to defects that are reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period. If there is not a Dealer, you must contact GF directly by calling (678) 291-3207, sending a fax request to 770-368-2386 or by e-mailing a request to cs@grahamfield.com. Specific directions will be provided by the Customer Service Representative.

EXCLUSIONS

The warranty does not cover and GF shall not be liable for the following: 1) Defects, damage, or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; 2) Products not installed, used, or properly cleaned and maintained; and 3) Labor or shipping charges. Other exclusions apply.

ENTIRE WARRANTY. EXCLUSIVE REMEDY AND CONSEQUENTIAL DAMAGES DISCLAIMER

THIS WARRANTY IS GF’S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED.

For the complete warranty for this product, please visit our website at www.grahamfield.com.

MANTENIMIENTO

- Para polvo, limpie el Walkane con una toalla suave y mojada.
- Examine las ruedas (si aplicable) por daño y desgasto periódicamente. Use un jabón suave y agua para limpiar, lave con agua limpia y seca con una toalla suave.
- Nunca use solventes orgánicos, limpiadores abrasivos o estropajos en cual quiere parte del Walkane.
- Examine su Walkane seminal para función y desgasto. Si algunos componentes so están funcionando correctamente o se ven con desgasto, llame a su distribuidor de GF Health Products, Inc. para reparación y partes de reemplazo.
- Si los mangos están sueltos, NO LOS use. Llame a su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc.
- Para el mejor servicio de su Walkane, siempre use partes de reemplazo de GF Health Products, Inc..

Para mas información sobre su producto, partes o servicio de GF Health Products, Inc, por favor de llamar a su distribuidor o visítenos online en www.grahamfield.com.

Directriz de Seguridad – Por Favor De Leer Antes de Uso

NOTA: Examine to das las partes por daño en transporte. Si hay daño en transporte, NO UTILICE. Llame a su empresa de transporte para instrucciones.

1. Cada individual SIEMPRE debe consultar con su doctor o otro profesional de cuidado de salud para determinar ajustamiento y uso apropiado.
2. Antes de uso, asegure que el Walkane esta en su posición abierto y asegurado.
3. Todas las patas TIENEN que estar en contacto con el piso todo el tiempo cuando en uso. Esto puede asegurar que el Walkane esta balanceado apropiadamente.
4. Este producto tiene una limitación de peso máximo de usuario de lb. SIEMPRE tiene que observar la limitación de peso en el “hangtag”.
5. Asegure que los mangos NO SE dan vuelta en el Walkane – o si no, daño o herida puede ocurrir.
6. SIEMPRE prueba que el Walkane y accesorios están puestos seguramente en la posición abiertos ANTES de uso.
7. Después de instalación y antes de uso, asegura que el ferretero esta seguramente apretados.
8. SIEMPRE use caución cuando usando el Walkane en superficies mojados y resbalosos. NO UTILICE el Walkane en escaleras o inclinas.
9. NO DEBE guardar o transportar el Walkane en la posición abierta. Dobra el Walkane cuando no en uso.
10. Antes de atentar a alcanzar objetos o recogerlos del piso alcanzando dentro sus rodillas, asegura sus pies en el piso. Usa caución EXTREMO cuando alcanzando por cual quiere objeto.
11. GF Health Products, Inc. no asu me ningún responsabilidad por cual quiere daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso incorrecto de este producto.
12. Examine su Walkane seminal para función normal y desgasto. Si algunos componentes no están funcionando y se ve con desgasto, llame a su distribuidor de Lumex para reparación o reemplace de partes.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIA: NO DEBE usar este producto sin leer y entender completamente estas instrucciones y material adicional que viene con este producto. Si no puedes entender los advertencias, cauciones o instrucciones, llame a su profesional, distribuidor o personal técnicos antes de tratar de usar este equipo – o si no, herida o daño puede ocurrir.

ADVERTENCIA: Si los componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor inmediatamente. NO substituye partes.

ADVERTENCIA: Antes de uso, asegure que las partes instalados están seguros y todo el ferreteria esta apretado.

ADVERTENCIA: Cuido debe estar hecho para asegurar que todos los ajustamientos de altura están seguros, y que las ruedas (si aplicable) y objetos que se mueven están en buenas condiciones antes de usar el Walkane.

ADVERTENCIA: SIEMPRE observa la limitación de peso del usuario en el “hangtag” de este producto.

ADVERTENCIA: Aviso a Clientes de California

ADVERTENCIA Proposición 65 de California: Este producto contiene una cemica que el Estado de California de causar cancer y herida reproductiva y de desarrollo.

ADVERTENCIA: Tenga cuidado cuando estés alcanzando por objetos. Alcanzando para estos objetos puede causar un cambio en la distribución de peso del rodador y puede causar que el Walkane se dobla, resultando en herida o daño.