

Garantia Limitada

La información de garantía siguiente es un SUMARIO de la Garantía del Producto completa provisto de GF Health Products, Inc. Para la garantía completa, por favor de visitar a la página de web www.grahamfield.com

GF Health Products, Inc. (“GF”) garantía al comprador original o arrendatario (cual quiera is el “Cliente”) solamente, que va reemplazar o reparar componentes, a la decisión solo de GF, cuales son defectos en material o calidad utilizado normalmente y con servicio. La garantía es para partes solamente y no incluye fuerza laboral o el costo de transporte. Todas garantías con condicionales por el uso apropiado del producto estrictamente en acuerdo con las instrucciones aplicables de GF. Producto pródigo a usuarios como réntales deben ser serviciados por el proveedor y inspeccionado antes de entrega. Cada usuario debe ser preparado en la operación y seguridad de este producto antes de uso. Dentro las reglas normales en este documento, la estructura tiene garantía por cinco (5) anos y los componentes de uso normal como puntas, ruedas y manijas tienen garantía por tres (3) meses. El periodo de garantía se comencia en la fecha de transporte al Cliente a menos que haya una fecha de expiración en el componente en cual la garantía se expira en la periodo de garantía o la fecha de expiración.

OBTENIENDO SERVICIO DE GARANTIA

La garantía limitada solamente aplica a defectos reportados al Distribuidor de quien el Cliente compro el producto dentro el periodo de garantía aplicable. Si no hay Distribuidor, debes llamar a GF directamente llamando (678) 291-3207, mandando fax a (770)-368-2386 o por email a cs@grahamfield.com. Direcciones específicos se van a dar por el Representante de Servicio De Clientes.

EXCLUSIONES

La garantía no cubre y GF será responsable por lo siguiente: 1) Defectos, daño o otras condiciones causadas por mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidente, daño de transporte o falta de buscar y obtener reparo o repuesto en manera puntual; 2) Productos no instalados, utilizados or mantenidos correctamente; y 3) Cargos de Labor o transporte. Otras exclusiones se aplican.

GARANTIA ENTERO, REMEDIO EXCLUSIVO Y DESCARGO DE DANOS CONSIGUIENTE

ESTA GARANTIA ES LA UNICA GARANTIA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTIAS, EXPRESIDAS O IMPLICITADAS.

Para la garantía completa por este producto, por favor de visitar a la página www.grahamfield.com

LUMEX®

Features:

- Versatile 3-in-1 design can be used as a bedside commode, raised toilet seat, or toilet safety frame
- Welded steel construction provides strength and stability
- Folds for convenient storage and travel
- Sturdy plastic seat snaps-on easily
- Comes complete with commode pail, cover and splash shield
- Designed to meet the requirements of HCPCS code: E0168
- Limited Lifetime Warranty

Specifications:

- 30" – Overall width
- 14" – Seat Width
- 16 ½" – Seat Depth
- 17 ½" - 21 ½" – Seat Height
- 650lb Weight Capacity EVENLY DISTRIBUTED

Características:

- Diseño 3-en-1 que es versátil puede ser usado como inodoro de cama, asiento de inodoro elevado, o marco de seguridad de inodoro
- Marco construido de acero provee esfuerzo y estabilidad
- Se dobla completamente para almacenaje conveniente y para viajar
- Asiento plástico es durable y se monta fácilmente
- Viene completamente con balde de inodoro, tapa y salpicadera
- Diseñando para reunir los requisitos del código HCPCS: E0168
- Garantía Limitada de por Vida

Especificaciones:

- 30" – Anchura total
- 14" – Anchura del asiento
- 16 ½" – Profundidad de asiento
- 17 ½" - 21 ½" – Altura de Asiento
- Capacidad de peso 650 lb UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA

For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, please visit our website at www.grahamfield.com

Para la información más ultimo sobre embalaje, garantías, productos y especificaciones, por favor de visitar a nuestro sitio de internet a www.grahamfield.com

© 2014, GF Health Products, Inc.
2935 Northeast Parkway, Atlanta, Georgia 30360
Made in China www.grahamfield.com

GF1000063RevB14

LUMEX®

Bariatric Folding Steel Commode

Inodoro Plegable de Acero

Item 7109A-2



Instructions for Use – Please Read All Instructions Before Use. Setup

1. Remove frame, seat, lid, pail, cover, and splash shield from carton.
2. Attach front support bar to arm rest by depressing the locking button and sliding into the armrest channel guide. When locking button locks into place an audible click can be heard. Repeat for other side.
3. Attach seat and then lid to rear support of frame. In the upright position, place splash shield or pail and cover in frame.
NOTE: When installing the seat onto the frame, make sure that the seat is evenly spaced between the side frames to ensure proper stability.
NOTE: Push down firmly until the seat snaps into place.
NOTE: DO NOT use excessive force when installing the seat and lid.

Adjusting Commode Height

1. Depress the height adjustment button and slide the lower leg upward or downward until the height adjustment button is fully engaged in the desired hole.
NOTE: An audible “click” will be heard.
2. Repeat for other 3 legs.
CAUTION: Ensure that all four commode legs are adjusted to the same height, and that all height adjustment buttons protrude fully through adjustment holes before use.

Inserting Back Bar


1. Remove back bar from carton.
2. Insert back bar into channel guides on back of commode until back bar push buttons protrude fully through channel guide holes (you will hear an audible click).

Use Commode over Toilet

1. Set commode to desired height (described in previous steps).
2. Remove commode pail and lid.
3. Position splash guard in place onto pail supports.
4. Remove back support (described in previous steps).
5. Lift toilet bowl seat.
6. Place commode over toilet with splash shield positioned over the center of the toilet bowl. Commode is now ready for use. Clean seat and splash guard with disinfectant after each use.

Use as Bedside Commode

1. Set commode to desired height (described in previous steps).
2. Lift commode seat and lid and place Commode pail onto pail supports. Ensure that pail is properly positioned below commode opening.
3. Place commode seat down. Commode is now ready for use.
4. When user is finished using commode, place commode pail lid over commode pail to contain odors.
5. Remove pail and lid simultaneously to empty pail. Clean seat and pail with disinfectant after each use.

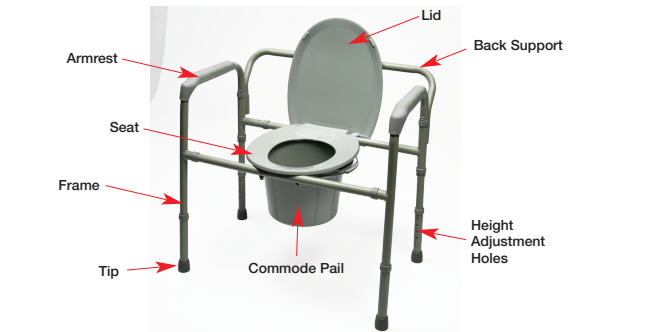

Maintenance

- Use a mild soap and water solution, rinse with clear water, then dry with a soft cloth. Ensure that product is well rinsed before using.
- Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the product.
- To guarantee the best service from your product, always specify Lumex replacement parts, available from your GF Health Products, Inc. authorized distributor.

For more information regarding GF Health Products, Inc. products, parts and services, please contact your distributor or visit us online at www.grahamfield.com.

Safety Guidelines – Please Read Before Use

NOTE: Check ALL parts for shipping damage. If shipping damage is noted, DO NOT use. Contact carrier/dealer for further instruction.

WARNING

WARNING: DO NOT use this product without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner’s manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.

WARNING: Users with limited physical capabilities should be supervised or assisted when using the commode.

WARNING: This product has a maximum weight capacity of 650 lb EVENLY DISTRIBUTED.

WARNING: GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly, or use of this product.

WARNING: Leg extensions with rubber tips MUST be in contact with the floor at all times.

WARNING: Ensure that the push buttons fully protrude through the same height adjustment hole of each leg extension. This ensures that the leg extensions are securely locked in position and that an even height adjustment is achieved.

WARNING: Make sure that all attaching hardware, screws, nuts and/or bolts are tight at all times.

WARNING: Inspect rubber tips on the leg extensions for rips, tears, cracks or wear or if they are missing. Replace them IMMEDIATELY if any of these conditions exist.

WARNING: The commode seat MUST be installed before sitting on the commode.

WARNING: Notice for California Customers
California Proposition 65 WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and reproductive or developmental harm.

WARNING: If components are damaged or missing, contact your GF Health Products, Inc. distributor immediately.

Instrucciones Para Uso – Lea y Entiende Todas Las Instrucciones Antes de Uso.

Montaje

1. Saque el marco, asiento, tapa, balde, tapa del balde y el escudo de salpicadura del cartón.
2. Sujeta la barre delantera al apoyabrazos empujando en el botón de cerradura y poniendo en la guía de canal del apoyabrazos. Cuando las cerraduras están en posición, se puede oír un “clic” audible. Repite por el otro lado.
3. Sujeta el asiento y después la tapa al soporte trasero del marco. En la posición vertical, coloque el balde o “splash guard” en el marco.
Nota: Cuando estas instalando el asiento en el marco, asegure que el asiento esta puesto dentro el centro de los marcos del lado para asegurar estabilidad apropiado.
Nota: Apreté firmemente hasta que el asiento se asegurar en puesto.
Nota: NO utilice esfuerzo excesivo cuando instalando el asiento y la tapa.

Ajustando la Altura del Inodoro

1. Apriete el botón de ajustamiento de altura y deslice la parta inferior de la pata hacia arriba y abajo hasta que el botón de ajustamiento esta asegurado en el hueco deseado.
Nota: Se oye un “clic” cuando esta puesto.
2. Repita para las otras 3 patas.
CAUTION: Asegure que todas cuatros patas están ajustados a la misma altura y que todos los botones de ajustamiento sobresalen por los huecos de ajustamiento antes de uso.

Instalando el Agarre de Respaldo

1. Remueve el agarre de respaldo del cartón.
2. Inserta el agarre de respaldo en las guías de canal en la parte trasera del inodoro hasta que el los botones de apretar sobresalen completamente por los huecos de la guía de canal (si va oír un “clic” audible).

Utilizar el Inodoro Sobre el Inodoro de Casa

1. Ajuste el inodoro a la altura deseada (descrito en los pasos anteriores).
2. Retira el balde y la tapa del inodoro.
3. Posicione el escudo de salpicadura en sitio en los suportes de balde.
4. Retira el soporte de espalda (descrito en los pasos anteriores).
5. Levante el asiento de la taza de servicio.
6. Ponga el inodoro sobre la taza de servicio con el escude de salpicadura sobre el centro de la taza de servicio. El inodoro esta listo para utilizar. Limpie el asiento y el escude de salpicadura con desinfectante después de cada uso.

Utilizar como Inodoro de Uso de Dormitorio

1. Ajuste el inodoro a la altura deseada (descrito en los pasos anteriores).
2. Levante el asiento y la tapa y ponga el balde del inodoro en los soportes del balde. Asegure que el balde esta posicionado apropiadamente debajo de la abertura del inodoro.
3. Ponga el asiento del inodoro abajo. El Inodoro esta listo para uso.
4. Cuando has terminado de usar el inodoro, ponga la tapa del balde para contener olor.
5. Retira el balde y la tapa al mismo tiempo para vaciar el balde. Limpie el asiento y balde con desinfectante después de cada uso.



Limited Warranty

The following warranty information is a SUMMARY of the complete Product Warranty provided by GF Health Products, Inc. For the complete warranty, please visit our website at www.grahamfield.com.

GF Health Products, Inc. (“GF”) warrants to the original retail purchaser or lessee (either is the “Customer”) only, that it will replace or repair components, at GF’s sole discretion, that are defective in material or workmanship under normal use and service. The warranty is for parts only and does not include labor or costs of shipping. All warranties are conditioned upon the proper use of the product strictly in accordance with applicable GF instructions. Product provided to users as rentals must be serviced by the provider and inspected prior to delivery. Each user must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use. Within the guidelines set forth in this document, the frame is warranted for five (5) years and the normal wear components such as tips, wheels/casters, and handgrips are warranted for three (3) months. The applicable warranty period shall commence from date of shipment to the Customer, unless there is an expiration date on the component in which case the warranty shall expire on the earlier of the warranty period or the expiration date.

OBTAINING WARRANTY SERVICE

This limited warranty shall only apply to defects that are reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period. If there is not a Dealer, you must contact GF directly by calling (678) 291-3207, sending a fax request to 770-368-2386 or by e-mailing a request to cs@grahamfield.com. Specific directions will be provided by the Customer Service Representative.

EXCLUSIONS

The warranty does not cover and GF shall not be liable for the following: 1) Defects, damage, or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; 2) Products not installed, used, or properly cleaned and maintained; and 3) Labor or shipping charges. Other exclusions apply.

ENTIRE WARRANTY, EXCLUSIVE REMEDY AND CONSEQUENTIAL DAMAGES DISCLAIMER

THIS WARRANTY IS GF’S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED.

For the complete warranty for this product, please visit our website at www.grahamfield.com.

MANTENIMIENTO

- Utilice una solución de jabón suave y agua, enjuague con agua limpia y seca con una toalla suave. Asegure que el inodoro esta enjuagado bien antes de uso.
- Nunca utilice solventes orgánicos, limpiadores abrasivos en cual quiere parte de este inodoro.
- Para garantizar el servicio mejor de su inodoro, siempre pide partes de reemplace de Lumex si son disponible por so distribuidor de GF Health Products, Inc.

Para mas información sobre su producto, partes o servicio de GF Health Products, Inc, por favor de llamar a su distribuidor o visitenos online en www.grahamfield.com.

Directriz de Seguridad – Por Favor De Leer Antes de Uso

NOTA: Examine to das las partes por daño en transporte. Si hay daño en transporte, NO UTILICE. Llame a su empresa de transporte para instrucciones.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIA: NO DEBE UTILIZAR este producto sin primero leer y entender estas instrucciones y cual quiere otro material como el manual de usuario, manual de servicio hoja de instrucción suministrado con este producto. Si no puedes entender las advertencias, cauciones o instrucciones, llame a su profesional de cuidio de salud, distribuidor o personal técnica antes de tratar de usar este equipo – o si no, herida o daño puede ocurrir.

ADVERTENCIA: Usuarios con capacidades físicos puede ser supervisados o asistidos cuando utilizar el inodoro.

ADVERTENCIA: Este producto tiene una capacidad máxima de peso de 650 lb UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA.

ADVERTENCIA: GF Health Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso impropio de este producto.

ADVERTENCIA: Extensiones de patas con puntas de goma TIENEN que estar en contacto con el piso todo el tiempo.

ADVERTENCIA: Asegure que los botones de apretar sobresalen completamente por los mismos huecos de ajustamiento de altura de cada extensión de pata. Esto asegura que las extensiones de pata están asegurados en posición y que el ajustamiento de altura esta uniforme.

ADVERTENCIA: Asegure que la ferreteria, tornillos y perillos están apretados todo el tiempo.

ADVERTENCIA: Examine las puntas de goma en las extensiones de patas para grietas o desgasto o si faltan. Reemplace IMMEDIAMENTE si estas condiciones existen.

ADVERTENCIA: El asiento del inodoro TIENEN que estar instalado antes de sentarse en el inodoro.

ADVERTENCIA: Aviso a Clientes de California
ADVERTENCIA Proposicion 65 de California: Este producto contiene una cemica que el Estado de California de causar cancer y herida reproductiva y de desarrollo.

ADVERTENCIA: Si los componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor de GF Health Products, Inc. inmediatamente.