

Universal Aluminum Crutches

Muletas Universales De Aluminio

Items 3610LF-8, 3611LF-8, 3612LF-8



SAFETY GUIDELINES - PLEASE READ BEFORE USE

1. This product should not be used without proper instruction from a healthcare professional.
2. This product has a maximum user weight limitation of 300 lb. - EVENLY DISTRIBUTED.
3. GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.
4. If components are damaged or missing, contact your distributor immediately. DO NOT use substitute parts.
5. Before use, ensure that crutch tips are not ripped, worn or missing, are properly seated and straight on each crutch.
6. Always use caution when using this product on wet or slippery surfaces. DO NOT use crutches on stairs or steep inclines.
7. Inspect crutches weekly for proper function and wear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your Lumex dealer for repair and/or appropriate replacement parts.
8. Before use, ensure that push buttons protrude fully through adjustment holes.
9. Proper height adjustments must be made to both the leg extension and the crutch handle. A dealer or therapist should aid in the proper placement for maximum balance and support.
10. Wing nuts MUST be tight at all times.

GENERAL WARNING

- **DO NOT** use this product without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner's manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- If components are damaged or missing, contact your GF Health Products, Inc. distributor immediately. **DO NOT** substitute parts.

GENERAL WARNING (CONT.)

- Before use, ensure that all assembled parts are secure and all hardware is tightened.
- Care should be taken to ensure that all height adjustments are secure.
- **ALWAYS** observe the user weight limitation on the hangtag of this product.

 **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm-
www.p65warnings.ca.gov.

INSTALLATION WARNINGS

- GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.
- Inspect product weekly or on a set routine preventative maintenance schedule for normal wear and tear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your Lumex dealer for repair and/or appropriate replacement parts.
- **ALWAYS** test to see that the product is properly secured in open position **BEFORE** use and ensure all hardware is securely tightened.

MAINTENANCE

- Wipe crutches weekly with a damp cloth.
- Grip and underarm pad may be cleaned with mild soap or detergent. DO NOT use organic solvents, such as acetone, which may damage grip.
- Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the product.
- Check hardware and positioning weekly for tightness.
- Replace crutch tips as needed.
- To guarantee the best service from your crutches, always specify Lumex replacement parts, available from your GF Health Products distributor.

For more information regarding GF Health Products, Inc. products, parts and services, please contact your distributor or visit us online at www.grahamfield.com.

ALUMINUM CRUTCHES SIZE

Selection Chart

Item Number	Size	User Height
3610LF-8	Adult	5' 2" – 5' 10"
3611LF-8	Tall	5' 10" – 6' 6"
3612LF-8	Youth	4' 6" – 5' 2"
3613C-8	Combination Pack of Adult, Tall and Youth crutches	

ADJUSTING HANDLE POSITION

1. Remove the wing nut and bolt securing the handle to the crutch.
2. Align the handle with the desired set of adjustment holes.
3. Secure with wing nut and bolt.
4. Repeat for other crutch.

HEIGHT ADJUSTMENT

1. Use double push buttons in center tube to adjust height in 1" increments.

Caution: Be sure that push buttons are fully protruding through the same respective adjustment hole of each leg extension. This ensures that the adjustable legs are securely locked into position and an even height adjustment is obtained.

LIMITED WARRANTY

GF Health Products, Inc. ("GF") warrants this product to be free from defects in materials and workmanship to the original retail purchaser or original lessee only ("Customer") for:

Frame: three (3) years


Tips, Wheels/Casters, and Handgrips: three (3) months

The warranty does not cover: 1) other non-durable components; 2) defects, damage or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; and 3) products not installed, used, or properly cleaned and maintained in accordance with the applicable GF instructions. Product provided to a lessee must be inspected prior to delivery and must be maintained by the Dealer. The lessee must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use.

GF will, at its option, repair or replace the defective product. Warranty issues must: 1) be reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period and 2) upon examination by GF or its authorized representative, prove to be a warranty item. GF is not responsible for freight or labor charges associated with the warranted item. If there is no Dealer, you must contact GF directly by calling 770-368-4700, faxing 770-368-4932 or e-mailing cs@grahamfield.com. Specific directions will be provided.

TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY IS GF'S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. EXCEPT IN CASES WHERE IMPLIED WARRANTIES MAY NOT BE VALIDLY WAIVED, GF MAKES NO IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. GF'S TOTAL LIABILITY FOR THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE COST OF THE PRODUCT(S) GIVING RISE TO THE CLAIM. IN NO EVENT WILL GF BE LIABLE FOR ANY DIRECT, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. CERTAIN LAWS MAY CONFER ADDITIONAL RIGHTS REGARDING WARRANTIES FOR SPECIFIC PRODUCTS AND IN THOSE INSTANCES GF'S LIABILITY AND THE LIABILITY OF GF'S SUPPLIERS, SHALL BE LIMITED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights, which vary from state to state or country to country.

For additional information related to warranty claims, please visit GF's terms and conditions located on www.grahamfield.com

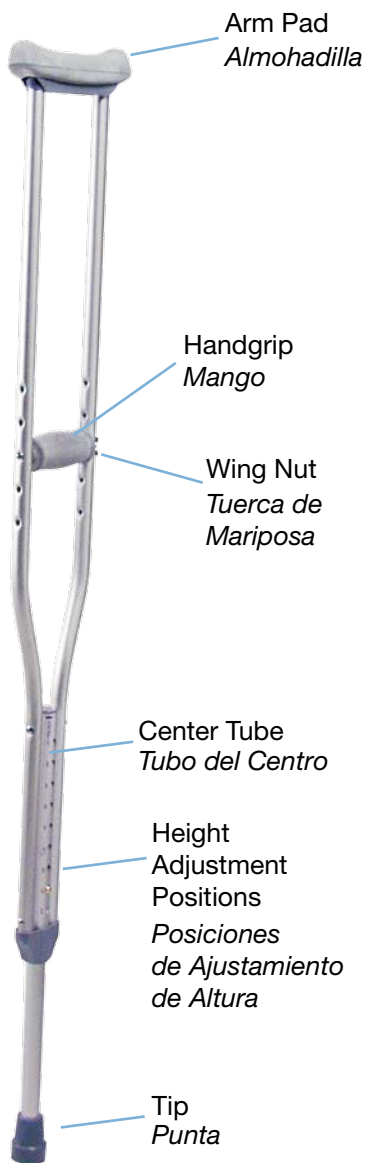

DIRECTRIZ DE SEGURIDAD – POR FAVOR DE LEER ANTES DE USO

1. Este producto no debe ser usado sin instrucciones apropiadas de su profesional de cuidado de salud.
2. Este producto tiene una capacidad de peso máximo de usuario de 300 lb.
- DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE
3. GF Health Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso impropio de este producto.
4. Si componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor inmediatamente. NO debe usar partes sustitutos.
5. Antes de uso, asegure que las puntas de la muleta están puesto correctamente por cada muleta.
6. Siempre utilice precaución cuando usando estos productos en superficies mojados y resbalosos. NO debe usar muletas en escaleras o inclinaciones empinadas.
7. Examine las muletas seminales para función normal y gasto. Si algún componente no está funcionando correctamente y se ve desgaste, llame a su distribuidor de Lumex para reparar y partes de reemplazo.
8. Antes de uso, asegure que los botones sobresalen completamente por los huecos de ajustamiento.
9. Ajustamiento de altura apropiado debe ser por ambas patas de extensión y el mango de la muleta. Un distribuidor o terapeuta puede ayudarle en ajustamiento apropiado para soporte y balance máximo.
10. Tuercas de mariposas TIENEN que estar apretados todo el tiempo.

ADVERTENCIAS

- **NO DEBE** usar este producto sin leer y entender completamente estas instrucciones y material adicional que viene con este producto. Si no puedes entender las advertencias, precauciones o instrucciones, llame a su profesional, distribuidor o personal técnico antes de tratar de usar este equipo – o si no, herida o daño puede ocurrir.
- Si los componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor inmediatamente. NO sustituya partes.

- Antes de uso, asegure que las partes instalados están seguros y todo el ferretería esta apretado.
- Se debe tener cuidado para asegurar que todos los ajustes de altura sean seguros.
- SIEMPRE observa la limitación de peso del usuario en el "hangtag" de este producto.
- Tenga cuidado cuando alcanzando por objetos cuando usando el andador. Alcanzando por objetos puede cambiar la distribuicion de peso en el andador y puede causar que el andador se dobla, resultando en herida o daño.

 **ADVERTENCIA: CANCER Y DANO REPRODUCTIVO**
www.p65Warnings.ca.gov

ADVERTENCIAS DE INSTALACION

- GF Health Products Inc. no asume responsibilidad por dano o herida hecho por instalacion inapropiado, ensambla o uso de este producto.
- Examina el producto semanalmente o en ua rutina de mantenimiento preventivo para uso normal. Si algun componente no esta trabajando correctamente o se aparece usado, llame a su distribuidor de Lumex para reparacion y/o partes de reemplace apropiado.
- SIEMPRE trata de ver que el producto esta asegurado correctamente in la posicion abierto ANTES de uso y asegure que los tornios/hardware estan ajustados seguramente. El soporte de espalda debe SIEMPRE estar puesto y NO es diseno para soportar todo el peso del usuario.

MANTENIMIENTO

- Para polvo, limpie el andador con una toalla suave y mojada.
- Examine las ruedas (si aplicable) por daño y desgaste periódicamente. Utilice un jabón suave y agua para limpiar, lave con agua limpia y seca con una toalla suave.
- Nunca use solventes orgánicos, limpiadores abrasivos o estropajos en ninguna parte del producto.
- Examine su andador seminal para función y desgaste. Si algunos componentes no están funcionando correctamente o se ven con desgaste, llame a su distribuidor de GF Health Products, Inc. para reparación y partes de reemplazo.
- Si los mangos están sueltos, **NO LOS** use. Llame a su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc.
- Para el mejor servicio de su andador, siempre use partes de reemplazo de GF Health Products, Inc.

Para mas información sobre su producto, partes o servicio de GF Health Products, Inc, por favor de llamar a su distribuidor o visítenos online en www.grahamfield.com.

TAMAÑOS DE MULETAS DE ALUMINIO

Tabla de Seleccionar

Item Number	Size	User Height
3610LF-8	Adulto	5' 2" – 5' 10"
3611LF-8	Alto	5' 10" – 6' 6"
3612LF-8	Joven	4' 6" – 5' 2"
3613C-8	Combinación de Adulto, Alto y Joven	

AJUSTAMIENTO DE LA POSICION DEL MANGO

1. Remueve la tuerca de mariposa y tornillo que esta asegurando el mango a la muleta.
2. Alíñe el mango con los huecos de ajustamiento deseado.
3. Asegure la tuerca de mariposa y el tornillo.
4. Repite para la otra muleta.

AJUSTAMIENTO DE ALTURA

1. Usa los botones dobles en el tubo del centro para ajustar la altura in incrementos de 1".

Caución: Asegurase que los botones están sobresaliendo completamente por los mismos huecos de ajustamiento de cada extensión de pata. Esto asegurara que las patas están seguros en posición y que has obtenido un ajustamiento de altura uniforme.

GARANTIA LIMITADA

GF Health Products, Inc. ("GF") garantiza este producto de ser libre de defectos en material o calidad utilizado al comprador original o arrendatario (cualquiera sea el "Cliente") solamente por:

Marco: tres (3) años

Ruedas, empuñaduras, frenos de mano, almohadillas de antebrazo, y asiento: tres (3) meses

La garantía no cubre: 1) otros componentes no durables; 2) defectos, daños u otras condiciones causadas, en su totalidad o en parte, por el mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidentes, daños durante el transporte, manipulación indebida o dejar de solicitar y obtener la reparación o el reemplazo de una manera oportuna; 3) productos que no se instalen, utilicen, limpien y mantengan de manera apropiada, como se requiere en el manual de GF. Productos provistos a un arrendatario deben ser inspeccionados antes de entrega y deben ser mantenidos por el Distribuidor. El arrendatario o Cliente debe ser entrenado propiamente en la operación y seguridad de este producto antes de uso.

GF va a decidir, a su opción, reparar o reemplazar un producto defectivo. Cuestiones de garantía deben: 1) ser reportados al Distribuidor de donde el consumidor compró el producto dentro del período de garantía aplicable y 2) en examinación por GF o su representante autorizado, dar prueba del producto de garantía. GF no es responsable por flete o cargos de labor asociados con el producto bajo la garantía. Si no hay un Distribuidor, puede contactar a GF directamente llamando 770-368-4700, por fax 770-368-4932 o por email cs@grahamfield.com. Direcciones específicas serán suministradas.

A LA MEDIDA MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESADAS O IMPLÍCITAS. GF NO HACE GARANTÍAS ENTENDIDAS DE CUALQUIERA MANERA INCLUYENDO GARANTÍAS ENTENDIDAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PREPÓSITO PARTICULAR. SI UN MODELO Y MUESTRA SE LE ENSEÑA A UN CLIENTE, TAL MODELO O MUESTRA FUE UTILIZADO SOLAMENTE PARA ILUSTRAR EL TIPO GENERAL Y CALIDAD DEL PRODUCTO Y NO PARA REPRESENTAR QUE EL PRODUCTO SE CONFORME CON ESE MODELO Y MUESTRA EN TODOS RESPETOS. TODA RESPONSABILIDAD DE GF POR CUALQUIER PRODUCTO ES LIMITADA AL COSTO DEL PRODUCTO EN LA RECLAMACIÓN. EN NO EVENTO EN CONTRATO, INDEMNIZACIÓN, GARANTÍA, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O OTRO QUE GF SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL, EJEMPLAR O CONSIGUIENTES. ALGUNAS LEYES PUEDEN CONFERIR DERECHOS ADICIONALES SOBRE GARANTÍAS Y EN ESOS INSTANTES LA RESPONSABILIDAD DE GF Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES DE GF SERÁN LIMITADAS A LA MEDIDA MÁXIMO PERMITIDA POR LA LEY. Esta garantía le provee derechos legales específicamente. Usted podrá tener otros derechos, que se varían por estado a estado o país o país.

Por información adicional sobre reclamaciones de garantía, por favor de visitar los términos y condiciones de GF que se encuentran en la página www.grahamfield.com

Features

- Anodized aluminum frame makes crutches a lightweight solution for user
- Reinforced center tube gives a stronger support to secure and maintain proper balance and stability
- Easy height and handle adjustment lets you adjust to best fit your needs
- Padded underarm pads and grips provide you with a comfortable and durable fit
- Maximum Weight Capacity 300 lb - **EVENLY DISTRIBUTED**

Características

- Marco de aluminio anodizado hace que las muletas son ligeros para usuarios
- Tubo reforzado del centro provee un soporte mas fuerte para asegurar y mantener un balance apropiado y estabilidad
- Ajustamiento fácil de altura y mango permite que se ajuste para sus necesidades
- Almohadillas y mangos provee que es confortable y durable
- Capacidad de Peso Máximo 300 lb - **DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE**

For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, please visit our website at www.grahamfield.com

Para la información más ultimo sobre embalaje, garantías, productos y especificaciones, por favor de visitar a nuestro sitio de internet a www.grahamfield.com

© 2006, GF Health Products, Inc.,
One Graham-Field Way, Atlanta, Georgia 30340.
Made in China. www.grahamfield.com